

flaesh.com

fläsh.

Отбеливание
проще простого

WHITEsmile®
25
YEARS - QUALITY
Made in Germany

RU



fläsh.

Отбеливание проще простого

Фактор успеха для Вашей клиники

Сегодня отбеливание зубов является важной частью эстетической стоматологии. Возможность услуги отбеливания зубов в Вашей клинике позволит добиться Вам больших успехов.

Информируйте своих пациентов о возможности отбеливания зубов в Вашей клинике:

Многие пациенты не обращаются в клинику непосредственно по поводу отбеливания. Предлагайте пациентам услугу отбеливания зубов при их обращении к Вам по другим видам лечения.

Отбеливание делает Вашу работу еще более заметной для пациентов

Демонстрация пациентам результатов ортодонтического лечения, имплантации особо эффективна при использовании фотографий до и после лечения. Комбинируйте отбеливание зубов с другими видами стоматологического лечения и Вы можете добиться еще больших результатов! Ваши пациенты будут довольны!

**С системой fläsh Ваша клиника
станет центром идеальных улыбок!**

Почему fläsh – Ваш лучший выбор?

25 лет опыта в отбеливании

Компания WHITEsmile специализируются в производстве продуктов для профессионального отбеливания зубов с 1994 года.

fläsh -инновационная система профессионального отбеливания зубов, разработанная совместно со стоматологами с учетом последних исследований и достижений. Вся продукция производится на заводе в Германии.

Интуитивное управление и безопасное использование - гарантированный результат

Достоверные результаты - лучшее отбеливание зубов каждый раз

Бережное отбеливание зубов и отличные результаты

Довольные пациенты

Удобство и простота применения

В наборе содержится все, что нужно для процедуры отбеливания

Управляемая функция лечения

Безопасность и надежность

WHITEsmile®
25
YEARS - QUALITY
Made in Germany



fläsh.

Лампа для отбеливания

Интуитивное управление — безопасная процедура отбеливания

Новейшая светодиодная технология: сфокусированный световой поток высокой интенсивности с видимым голубым светом

Срок службы светодиодов составляет более 10 000 применений

Система Easy Lock обеспечивает эргономичное управление с возможностью позиционирования источника света напротив пациента

Специальные настройки для отбеливания чувствительных зубов/ одиночных зубов.

Регулируемая мощность светового потока

Оптимальные результаты с использованием гелей fläsh Chairside Light Whitening Gel

Безопасная рабочая температура

Комплектация:

- Лампа fläsh
- Частота светового излучения 465 нМ
- Источник высокоинтенсивного светового излучения от синих LED 190 мВт/см²
- 100 — 240 В
- Очки защитные - 3 пары
- Карта времени flash



Точное
позиционирование
Регулируемая
система Easy Lock


Инновационная
система
fläshcard

fläsh.


CE

Полноцветный сенсорный дисплей 3 режима отбеливания

постоянный режим, импульсный режим,
одиночный режим

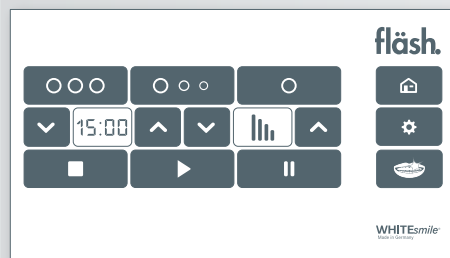

Иллюстрированная инструкция пользователя на дисплее

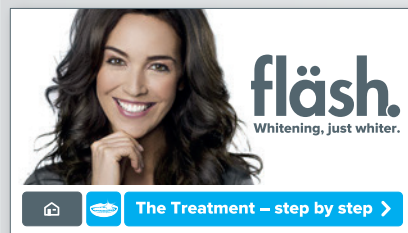


Определение полученного в результате отбеливания оттенка



fläshcard

Система управления временем

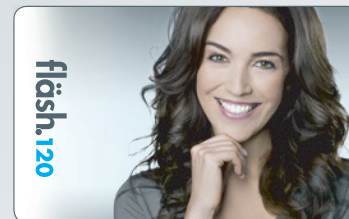

Видео

Лечение шаг за шагом
www.flash.com



fläsh.

Chairside Light Whitening System

Система офисного светового отбеливания

Система офисного отбеливания fläsh Chairside Light Whitening System с активным хлорофиллом бережно отбеливает зубы.

Активным действующим веществом отбеливающего геля fläsh является перексид водорода. Выпускается в двух концентрациях:

- гель 6% косметическое отбеливание
- гель 32% отбеливание по медицинским показаниям

Гель выпускается в двухкамерном шприце. Смешивание ингредиентов происходит с помощью одноразовой смешивающей канюли непосредственно перед применением. Неиспользованный гель хранится в закрытом шприце в пределах общего срока годности и применяется для последующих процедур отбеливания с новой смешивающей канюлей.



Гель зеленого цвета для
точного нанесения



Легкое точное позиционирование источника
света лампы к губному ретрактору



Гибкий губной ретрактор для легкого введения в
полость рта пациента. Выпускается в трех размерах.
Автоклавируемый

Гель имеет оптимальную консистенцию, не растекается при нанесении.

Продолжительность лечения определяется индивидуально и зависит от чувствительности зубов, от причин и степени дисколорации зубов. Как правило, клиническая эффективность достигается при отбеливании 1 — 3 раз по 15 минут в одно посещение.

Гель используется совместно с лампой fläsh Whitening Lamp.

Для поддержания достигнутого эффекта отбеливания может быть использована система домашнего отбеливания fläsh Take Home Whitening.

Комплектация:

- Отбеливающий гель fläsh Chairside Light Whitening 32% HP 2 x 4 г
- GINGIVA PROTECTOR 2 x 1,5г
- AFTER WHITENING MOUSSE 2 x 1,2 мл
- Витамин Е 2 унисдозы x 0,4 мл
- Валики 4 x 9 см
- Ретрактор 2 шт.
- Зубная паста fläsh Whitening Toothpaste лайм-мята 2 x 75 мл
- Карта времени на 120 минут



fläsh.

Take Home Whitening System

Система домашнего отбеливания для применения в индивидуально изготовленных лабораторным методом каппах

- Гель Home Whitening в шприцах по 3 мл
- AFTER WHITENING MOUSSE для снятия чувствительности и реминерализации
- Пластины для изготовления капп
- Blocker фотоотверждаемый материал для нанесения на модель при изготовлении капп

Концентрации:

- 10% перекись карбамида (~3,5% НР) для ночного ношения капп
- 16% перекись карбамида (~5,6% НР) для ночного или дневного ношения капп



Может применяться для пациентов старше 18 лет

fläsh.

Whitening Toothpaste Care & Repair

Интенсивный уход для отбеленных зубов с содержанием 30% ксилитола и 15% гидроксиапатита

fläsh Whitening Toothpaste - идеальный уход для отбеленных зубов перед и после отбеливающих процедур. Рекомендуется для ежедневного использования. Используется в том числе для чувствительных зубов. Укрепляет эмаль благодаря содержанию гидроксиапатита (15%). Двойная защита от кариеса благодаря содержанию фторида натрия и ксилитола. Неабразивная.

- 1100ppm натрия фторида, 30% ксилитол, 15% гидроксиапатит
- Не содержит лаурилсульфат натрия, триклозан, отбеливающие вещества
- Вкус: лайм-мята, 75 мл



Whitening Pen Tooth Whitening to go

Отбеливающий карандаш

- 4 мл, 16% перекиси карбамида (~ 5,6%HP)
- Вкус: мята



Может применяться для пациентов старше 18 лет




fläsh.

Tooth Whitening App

Отбеливание зубов flash в приложении Вашего телефона

- Визуализация результатов отбеливания с использованием фотографий до и после процедуры отбеливания
- Простое и точное определение зубов
- Моделирование яркости с автоматическим определением уровня освещенности на ваших фотографиях
- Сохранение фотографий
- Функция сравнения до и после
- Обмен фото посредством e-mail, Facebook или Twitter

С помощью приложения fläsh Вы можете позволить пациенту сравнить их цвет зубов до и после процедуры отбеливания

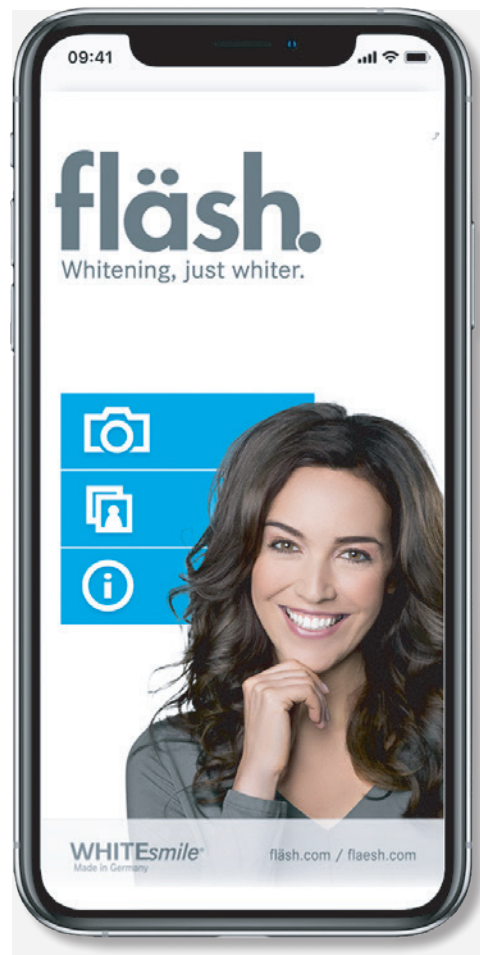

Скачать приложение fläsh бесплатно можно для Android и iPhone

flaesh.com

fläsh.

Отбеливание проще простого

Республика Беларусь 220012

г. Минск, ул. Академическая,
17 - 2Н, ком. 3

Тел./факс (торговый отдел):

+375 17 331 13 88

+375 17 331 09 11

+375 17 331 14 30

+375 17 331 12 41

Тел. мобильный (velcom):

+375 29 684 89 10

+375 29 597 64 49

e-mail:

torg@vmk-dent.by

Сайт - vmk-dent.by

интернет-магазин - shop.vmk-dent.by

Филиалы:

г. Брест, бульвар Космонавтов, 75/1, ком.3

+375 162 28 25 59

+375 29 720 00 12

e-mail: vmk_brest@mail.ru

г. Витебск, ул. Кутузова, д.13, к.10

Тел/факс:

+375 212 48 55 20

+ 375 29 595 03 86

+375 29 636 07 04

e-mail:

vitebsk@vmk-dent.by

г. Гомель, пр. Ленина, д.6, ком.210

Тел/факс:

+375 232 30 29 20

+375 44 599 06 90

e-mail:

vmk-gomel@rambler.ru

г. Гродно, ул. Горького, 49, к.410

Тел/факс:

0152 77 32 99

+375 29 866 99 02

+375 29 144 11 02

e-mail:

grodno@vmk-dent.by

г. Могилев, 3-й Октябрьский переулок д.9 ком.103

Тел/факс:

0222 22 51 88,

+375 44 785 68 02

e-mail:

vmk_mogilev@mail.ru

