

# ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ЗУБЫ ANIS EXPERT



- Анатомическая форма и рельеф на вестибулярной поверхности фронтальных зубов
- Легкость постановки при анатомической форме жевательных зубов
- Точное попадание в цвет
- Увеличенная прочность

## НАСЛОЕНИЕ АКРИЛА

### ФРОНТАЛЬНЫЕ ЗУБЫ

Фронтальные зубы Anis Expert имеют анатомическую форму и рельеф на вестибулярной поверхности

#### Состоят из 4-х слоев:

- шейка (1)
- дентиновое ядро (2)
- вестибулярный прозрачный слой (3)
- язычный прозрачный слой (4)

**Цвет шейки** не контрастирует с цветом зуба, что позволяет оставлять шейки открытыми при необходимости.

**Дентиновое ядро** находится внутри прозрачек, что дает возможность свободно дорабатывать зубы с язычной стороны без боязни изменить цвет зуба или получить слишком прозрачный режущий край.

**Режущий край** имеет плавный переход из дентина в прозрачку и не просвечивается насквозь. Такое наслоение упрощает работу техникам при постановке, позволяя получить высокоэстетичный результат.

**Точно попадают в цвет.** Расположение слоев, их состав и цвет созданы таким образом, что зубы имеют глубину режущего края и при этом цвет зуба не тускнеет под прозрачкой.



## ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ЗУБЫ

Жевательные зубы Anis Expert имеют анатомическую форму, при этом легки в постановке.

Состоят из 3-х слоев:

- шейка (1)
- дентиновое ядро (2)
- прозрачный слой (3)


**Расположение слоев**, их состав и цвет созданы таким образом, что язычная сторона почти не отличается по цвету от вестибулярной и переход между слоями практически незаметен.

**Выемка** с обратной стороны зуба позволяет легко и быстро убрать лишний материал при постановке в съемные протезы при нехватке межальвеолярной высоты.

**Увеличенная высота** лингвальной поверхности зуба позволяет использовать их и для комбинированных работ.

**Материал** в области вершин бугров замутнен и имеет большой объем, что дает много места для обработки зуба.

Прессование в 3 слоя под большим давлением позволяет добиться большей **прочности зуба**

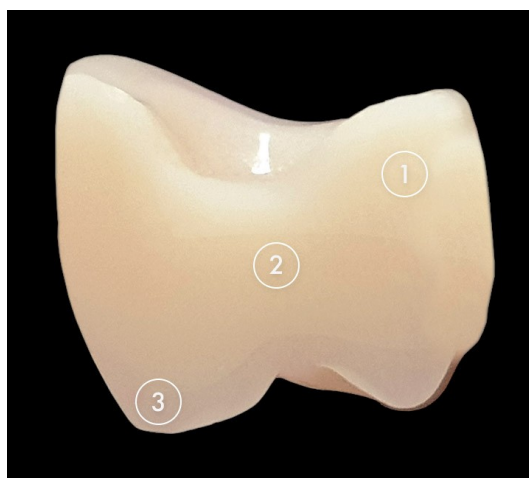

## ОТТЕНКИ

A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 C2 C3 D2 D3



г. Минск, ул. Платонова, 1Б, подъезд 5, пом. 41 и 41Б  
Тел.: (017) , 361-1-361, .361-1-360, 361-11-87, 361-74-87  
А1: (029) 684-89-10  
МТС: (029) 597-94-49  
Факс: (017) 361-00-24

### Филиалы:

г. Брест, бульвар Космонавтов, 75/1, ком.3 тел.: (0162) 28-25-59.  
г. Витебск, ул. Кутузова, д.13, ком.10 тел.: (0212) 62-55-93  
г. Гомель, пр. Ленина, д.6 к.210 тел.: (0232) 30-29-20  
г. Гродно, ул.Горького, д.49 к.410 тел.: (0152) 55-71-19.  
г. Могилев, 3-й Октябрьский переулок, д.9, к.103 тел.: (0222) 32-28-85.

[www.vmk-dent.by](http://www.vmk-dent.by)

[shop.vmk-dent.by](http://shop.vmk-dent.by)

Мы в соцсетях

