


C-EXPLORER

Ультразвуковая хирургическая система



7-дюймовый полноцветный сенсорный экран
простое управление

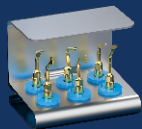

Костная хирургия

US1
Остеотомия

US2*2
Остеотомия

US4

Ремоделирование кости
Сбор костной стружки



US5

Ремоделирование кости
Сбор костной стружки

Синуслифтинг

UL3

Резка связок

UC1




Набор базовых насадок

US1/US2*2/US4/US5/UL3/UC1

6 видов (комплект включает 7 штук)

Мощность
Надежность
Многофункциональность

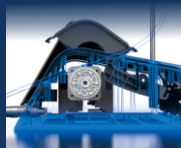

Ультратихая водяная помпа
Комфортная работа

Высокопроизводительный наконечник


Светодиод высокой яркости обеспечивает более четкую видимость при работе

Конструкция наконечника поддерживает низкую температуру при работе на полной мощности

Подвод воды реализован через отдельный шланг, что повышает безопасность использования аппарата и упрощает его обслуживание



Контроль объема воды
Переключение режимов работы
Регулировка мощности

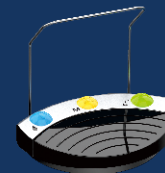

Многофункциональная ножная педаль

Управление несколькими функциями

Многорежимная система работы

Легкое переключение



Режим «Кость»

- а) Мощность 6-7: очень высокая плотность кости
- б) Мощность 4-5: высокая плотность кости
- в) Мощность 2-3: средняя плотность кости
- г) Мощность 1: низкая плотность кости




Режим «Перио»



Режим «Эндо»



Режим «Очистка»

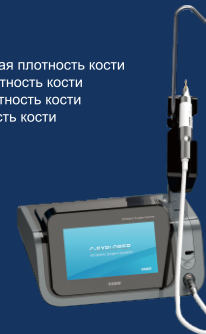

ВМК-Дент

ЧТУП «ВМК-Дент»

Эксклюзивный дистрибьютор на территории Республики Беларусь
УНП 190819937 г. Минск, ул. Платонова, 1Б, помещение 41Б, комната 1
Тел. +375 (17) 361 13 61; А1: +375 (29) 684 89 10; МТС: +375 (29) 597 94 49