

Diamantscheiben • Diamond Discs • Disques diamantés

Diamantscheibe für Sägestümpfe aus Gips, randgesintert




zum Trennen von Zahnkränzen bei Gipsmodellen.

Plaster diamond discs with sintered rim for dies, tooth arch separation on plaster models.

Disque diamanté pour plâtre, avec bord diamanté dans la masse, pour dies, pour la séparation des arcades dentaires dans les modèles en plâtre.

Flex
807 104 ...

■ 321

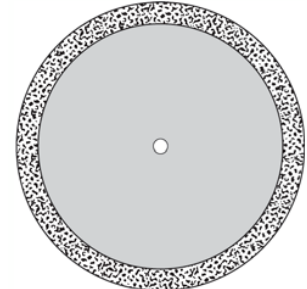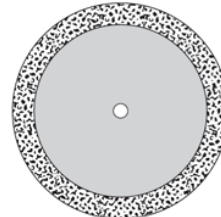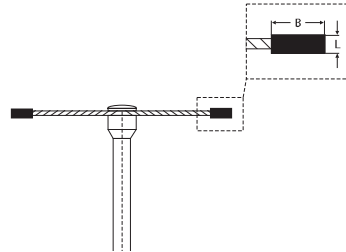

Größe/ Size/ Taille	ø 1/10 mm	300	400
Belegung/ Coating/ Granulation	B mm	3,00	3,00
Kopf/ Head Length/ Longueur mm	L mm	0,30	0,30

Shank 

REF



HP 807.104. ...

■ 321.524.300

■ 321.524.400

⌚ opt. 20.000 rpm



806.104.365.524.450

Die Perforation des diamantierten Arbeitsbereiches erhöht die Selbstreinigungseigenschaften der Scheibe. Dadurch verschmiert die Scheibe nicht und ist für feuchten Gips geeignet.

The diamond-coated working area is perforated to increase the self-cleaning properties of the disc. This prevents the disc from clogging and allows it to be used on moist plaster.

Les perforations de la partie travaillante diamantée du disque augmentent sa capacité de séparation. Ainsi, le disque ne bourre pas et est utilisable sur plâtre humide.


Flex
806 104 ...

■ 365

Diamantscheiben für Gips

Diamond Discs for Plaster

Disque diamanté pour plâtre

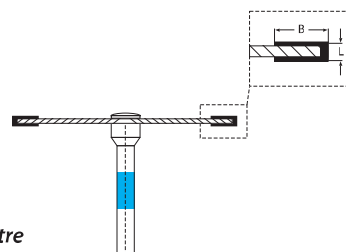

Größe/ Size/ Taille	ø 1/10 mm	300	450
Belegung/ Coating/ Granulation	B mm	3,0	4,5
Kopf/ Head Length/ Longueur mm	L mm	0,24	0,24

Shank 

REF



HP 806.104. ...

■ 365.524.300

■ 365.524.450

⌚ opt. 20.000 rpm

■ Gelber Ring/Yellow Ring/Bague jaune	Superfein/Superfine/Superfin	30 µm	ISO No. 504
■ Roter Ring/Red ring/Bague rouge	Fein/Fine/Fin	50 µm	ISO No. 514
■ Blauer Ring/Blue ring/Bague bleue	Standard/Standard/Standard	100 µm	ISO No. 524